


PARA ENXERTO E
FIXAÇÃO DE MEMBRANAS
LINHA ORTH



Código	Descrição	Quantidade
27564	Fresa Helicoidal 1.2	01
27557	Fresa Helicoidal 1.5	01
25945	Chave Orth Motor	01
26668	Chave Orth Motor longa	01
26669	Chave Orth Manual	01
26574	Estojo Bone Fix	01

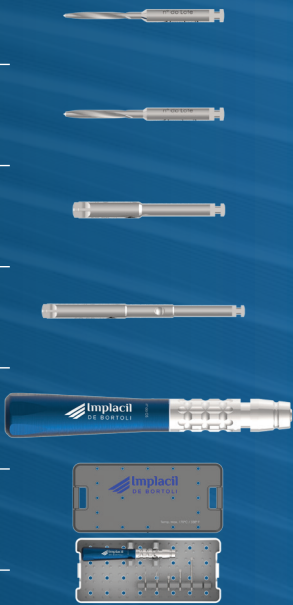

IMPLANTES PARA ENXERTO
E FIXAÇÃO DE MEMBRANAS
LINHA ORTH



Rua Cesário Ramalho, 821 - Cambuci | São Paulo - SP
SAC 55 11 3342.5100 | 0800.779.0011
f /implacildebortoli | @implacil | www.implacil.com.br

PARA ENXERTO E FIXAÇÃO DE MEMBRANAS


IMPLANTE ORTH AUTOPERFURANTE

O implante **ORTH Autoperfurante** para fixação de membrana foi desenvolvido como uma alternativa ao uso de tachas para estabilização de membrana. Os implantes **ORTH** são autoperfurantes, permitindo a fácil inserção através do osso cortical, não sendo necessárias perfurações iniciais com fresas ou aplicação de martelo para fixação.

O encaixe cruciforme permite perfeita fixação no implante ORTH e chave de instalação, oferecendo excelente estabilidade para fixação de membranas de PTFE, membranas de colágeno e malhas de titânio.

O implante **ORTH Autoperfurante** de 3 e 4 tem ótima indicação quando houver a necessidade de trabalhar próximo a raízes de dentes adjacentes à área enxertada. O de 5 é ideal para osso tipo IV (baixa trabeculagem) devido a melhor fixação.


DESCRIÇÃO	CÓDIGO
Implante ORTH Autoperfurante 1,5 X 3,0 mm	25492
Implante ORTH Autoperfurante 1,5 X 4,0 mm	25494
Implante ORTH Autoperfurante 1,5 X 5,0 mm	25496

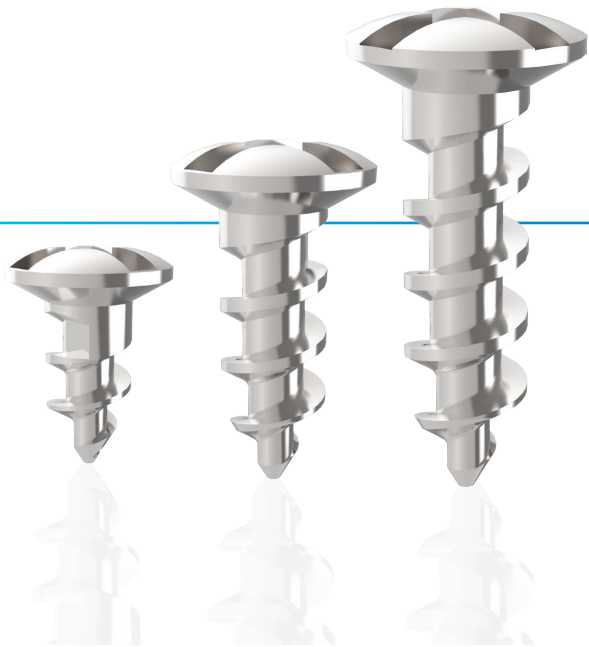

IMPLANTE ORTH AUTORROSQUEANTE CABEÇA EXPANDIDA

O implante **ORTH Autorrosqueante Cabeça Expandida** foi projetado com pescoço polido e cabeça mais larga para manter o espaço sob membranas reabsorvíveis e não reabsorvíveis nos procedimentos de regeneração óssea horizontais e verticais. Para instalação, é recomendável um orifício pré-perfurado de 1,2 mm.

DESCRIÇÃO	CÓDIGO
Implante ORTH Autorrosqueante Cabeça Expandida 1,5 X 8,0 mm	25498
Implante ORTH Autorrosqueante Cabeça Expandida 1,5 X 10,0 mm	25500

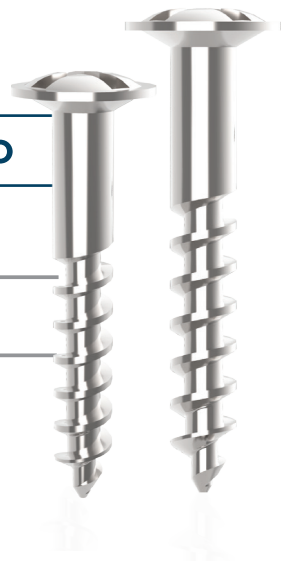

IMPLANTE ORTH AUTORROSQUEANTE

O implante **ORTH Autorrosqueante** é projetado com roscas autorrosqueantes mais finas, que conferem maior força de fixação, ao mesmo tempo que usam menos torque para inserção.

A cabeça do implante Orth permite que o mesmo seja parafusado até a superfície do osso, não deixando nenhum espaço entre a cabeça do parafuso e o osso. Para instalação, é recomendável um orifício pré-perfurado de 1,2 mm.

DESCRIÇÃO	CÓDIGO
Implante ORTH Autorrosqueante 1,5 X 8,0 mm	25502
Implante ORTH Autorrosqueante 1,5 X 10,0 mm	25504

